

KINOS X

Fokuser på dine pasienter



LOJER®

For Easy
Care





Kinos X5



Kinos X4

Viktigste funksjoner:

1. Kan brukes liggende på mage, rygg og i sittende stilling.
2. Robust konstruksjon som tåler selv de tyngste pasientene.
3. Justering med fotkontroll gir frie hender

Lojers behandlingsbenk Kinos X er utviklet for terapeuter og fagfolk som arbeider med krevende og variert rehabilitering. Kinos X har et bredt høydejusteringsområde, som gjør det enkelt å tilpasse til ulike behov. Benken er utstyrt med elektrisk høydejustering på hjulene, en helt ny funksjon, som gjør det utrolig enkelt å flytte den rundt. Lojer har lagt ned mye arbeid i design og produkttesting for å optimalisere brukeropplevelsen. Kinos X har bestått alle tester i henhold til regelverket for medisinsk utstyr. Testene ble utført av et eksternt testlaboratorium.

Utvalget:

- Kinos X5 har en 65 cm bred, todelt liggeflate med justerbar ryggdel. Ryggdel og høyde kan justeres på en hygienisk måte med fotbøyle fra begge sider av benken.
- Kinos X4 har en 55 cm bred, hel liggeflate med nedfellbare sidestøtter. Høyden på benken kan justeres med fotbøyle fra begge sider av benken.



Benkens ryggdel og høyde justeres hygienisk med en fotbøyle, slik at du har hendene fri til å hjelpe og støtte pasienten.

Lojer Kinos X behandlingsbenk er robust og solid, med høy sikker arbeidsbelastning (SWL).




FUTUREs antimikrobielle møbeltrekk er ISO-sertifisert. Materialet er lett å rengjøre og seks ganger mer slitesterkt enn skai (imitert skinn).



Tekniske data og egenskaper

Modell	X4	X5
Total bredde	55 cm	65 cm
Total lengde	203 cm	203 cm
Total vekt	98 kg	109 kg
Høydejustering	46 - 95 cm	46 - 95 cm
Lengde ryggseksjo	-	52 cm
Justering ryggseksjon	-	0 - 70°, elektrisk
Justering hodedel	-90°...+35° (U-modell)	-90°...+35° (U-modell)
Hjul	Ø65 mm, løftes elektrisk	Ø65 mm, løftes elektrisk
Andre standardfunksjoner	Sikkerhetsfunksjoner: automatisk løft i nødsituasjoner Benken låses automatisk etter 120 minutter hvis den ikke er i bruk Motorene trekker ikke, men senkes av tyngdekraften Armstøtte Sidestøtte En lang fotbøyle for høydejustering på begge sider av benken Hjulene løftes elektrisk	Sikkerhetsfunksjoner: automatisk løft i nødsituasjoner Benken låses automatisk etter 120 minutter hvis den ikke er i bruk Motorene trekker ikke, men senkes av tyngdekraften Armstøtte To fotbøylar på begge sider av benken for justering av høyde og ryggseksjon Hjulene løftes elektrisk Formstøpt pute til hullet i hodedelen
Trekk	Materiale Future, farge Carbon	Materiale Future, farge Carbon
Farge ramme	Carbon	Carbon
Safe working load (SWL)	210 kg	210 kg
Elektrisk system	24V, IPX6	24V, IPX6
CE-merking	Ja, MDR-godkjent	Ja, MDR-godkjent
Garanti	2 år	2 år
Produksjonsland	Finland	Finland

Kinos X4

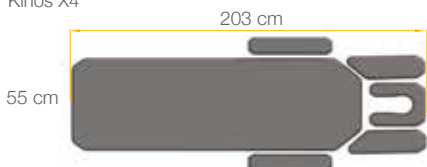

Kinos X5

